


# TENS ECO WIRELESS

Rechargement des batteries


## 1 Préparation de la station de charge

Positionnez les 2 modules de batteries dans les 2 fentes de charge de la station de charge. La station de charge permet de charger 1 batterie ou les 2 batteries à la fois.

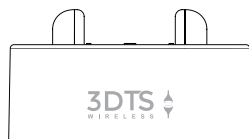

## 2 Chargement des batteries

Branchez la station de charge sur le secteur à l'aide du câble de raccordement fourni. Un témoin lumineux confirme que la station de charge est bien sous tension. Une diode orange continue confirme que la batterie est bien en cours de chargement. Une diode verte continue confirme que la charge de la batterie est terminée. Vous pouvez alors retirer la batterie et débrancher la station de charge.

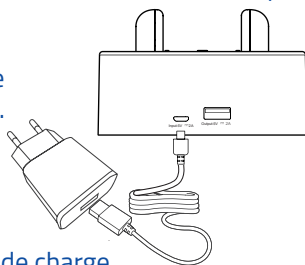


### REMARQUE :

Si durant la phase de charge, la batterie n'est pas bien enfoncée dans sa fiche de charge, la diode reste verte également parce que la batterie n'est pas reconnue.

## 3 Chargement de la télécommande

Le chargement de la télécommande s'effectue en reliant la télécommande à la station de charge à l'aide du cordon USB-micro-USB fourni, comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Quand la télécommande est en charge, l'écran indique l'avancement du niveau de charge.

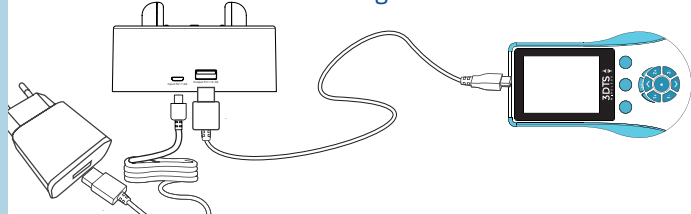

26-10-2021 V04

# TENS ECO WIRELESS

MODE D'EMPLOI SIMPLIFIÉ

Les mêmes programmes anti-douleur que le TENS ECO2 et le TENS ECO PLUS



- P1 Gate control 100 Hz
- P2 Gate control 80 Hz
- P3 Endorphinique 2 Hz
- P4 Gate control ( canal 1 : 100 Hz ) + endorphinique ( canal 2 : 2 Hz )
- P5 TENS séquentiel : 10 min Gate control 100 Hz + 20 min endorphinique 2 Hz
- P6 Stimulation HAN : 100 Hz + 2 Hz alterné toutes les 3 secondes
- P7 TENS Burst 2 Hz
- P8 TENS Modulation 2 à 80 Hz
- P9 Excito-moteur
- P10 Gate control 80 Hz dynamic lent ( massage )
- P11 Gate control 80 Hz dynamic rapide ( frottements )
- P12 TENS haute fréquence
- U1 Traitement facial 80 Hz - 60µs (traitement des zones sensibles cutanées)
- U2 Traitement des nausées 10 Hz - 180µs



Distribué par **schwa-medico**  
FRANCE

CE 0197

30 rue Joffre · 68250 Rouffach-FRANCE  
Tél. 03 89 49 73 61 · Fax : 03 89 49 72 43  
[info@schwa-medico.fr](mailto:info@schwa-medico.fr)

# TENS ECO WIRELESS


## MODE D'EMPLOI SIMPLIFIE

**PRIMORDIAL :** Avant la mise en route de la télécommande, placez d'abord les électrodes sur la peau (2 ou 4 électrodes), reliez ensuite 1 module « batterie » avec 1 module « stimulateur » à l'aide d'un câble de liaison et connectez un module sur chaque électrode. Puis allumez chaque module « stimulateur » en appuyant pendant 2 secondes sur le bouton d'activation jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume.




### 1 Mise en marche/arrêt

Appuyer sur la touche centrale pour allumer l'appareil

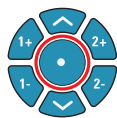

### 2 Choix du programme

Appuyer sur la touche «P» pour choisir le programme souhaité

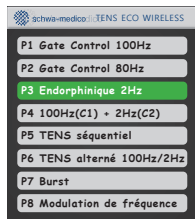

### 3 Navigation

Pour naviguer entre les différents programmes, utilisez les touches suivantes :

- Pour monter / descendre dans la liste des programmes
- Pour sélectionner un programme
- Pour revenir à l'écran précédent (ou remonter dans l'arborescence)

### 4 Réglage des intensités



- Pour augmenter ou réduire l'intensité
- simultanément sur les 2 canaux



**Attention :** Verrouillage automatique des intensités après 10 secondes. Pour déverrouiller, baisser l'intensité d'un clic.

### 5 Stopper la stimulation

Pour stopper la stimulation, appuyer sur la touche






# TENS ECO WIRELESS

## REGLAGES DES PARAMETRES

Durant la phase de démarrage de l'appareil (qui dure environ 3 secondes), vous avez la possibilité d'accéder aux Réglages.

-> Cliquez alors sur bouton en haut à gauche du clavier (comme illustré ci-dessous) pour accéder aux paramètres de réglage.

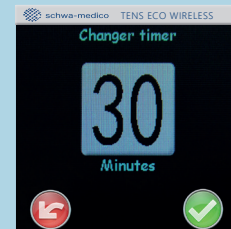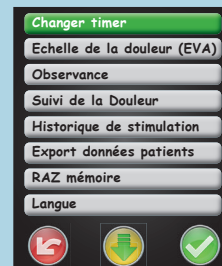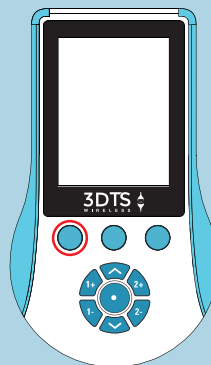

### Paramètres avancés :

Dans ce menu, vous pouvez modifier certains réglages ou consulter d'autres informations. Vous avez par exemple la possibilité de modifier la durée des séances en choisissant l'option « Changer Timer ».

### -Réglage du Timer :

Vous avez la possibilité de régler la durée des séances entre 1 minute et 99 minutes (réglage par palier de 1 minute) ou de laisser le timer ouvert (stimulation illimitée en continu). Pour régler la durée, utilisez les touches puis validez

avec la touche de validation . Une fois les données enregistrées, vous revenez au menu Réglages, en cliquant sur le

bouton retour , puis cliquez une deuxième fois sur retour pour accéder à l'écran principal permettant de démarrer la stimulation.

## Rechargement des batteries

### CONSULTEZ LA PAGE SUIVANTE

POUR PLUS D'INFORMATIONS, LISEZ INTÉGRALEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER À UTILISER L'APPAREIL.

Avant la première utilisation de l'appareil, pensez d'abord à bien charger les batteries jusqu'à leur maximum. Pour cela, lire la procédure page suivante.